


台紙寸法：  
90mm×150mm

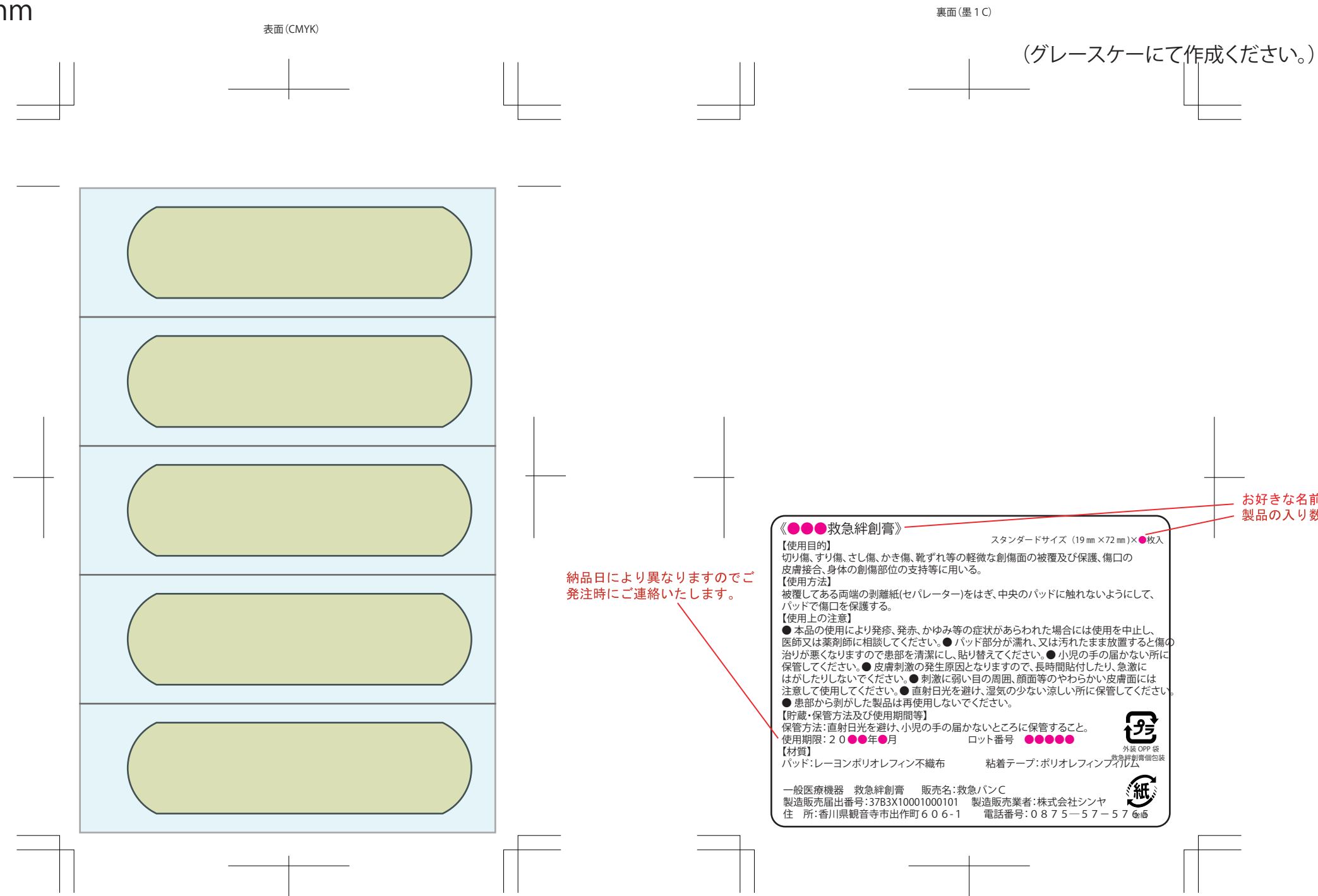

●●●救急絆創膏

スタンダードサイズ (19mm×72mm)×5枚入

【使用目的】  
切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷面の被覆及び保護、傷口の乾燥防止、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法】  
被覆してある両端の剥離紙(セパレーター)をはぎ、中央のパッドに触れないようにして、パッドで傷口を保護する。

【使用上の注意】  
●本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●パッド部分が濡れ、又は濡れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので患部を清潔にし、乾かしてください。●小児の手の届かない所に保管してください。●皮膚刺激の発生原因となりますので、長時間貼付したり、急激にはかしたりしないでください。●刺激に弱い目の周囲、顔面等のやわらかい皮膚面には注意して使用してください。●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。●患部から剥がした製品は再使用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】  
保管方法：直射日光を避け、小児の手の届かないところに保管すること。  
使用期限：20●●年●●月

【材質】  
パッド：レーヨンポリオレフィン不織布 粘着テープ：ポリオレフィン

ロット番号 ●●●●●●

一般医療機器 救急絆創膏 販売名：救急バンド  
製造販売元：三洋電機株式会社  
住所：香川県高松市出作町6-0-1 電話番号：0875-57-5766


納品日により異なりますので  
発注時にご連絡いたします。

お好きな名前をお付けください  
製品の入り数をご記入ください

- 書式のレイアウトは自由にお決め下さい。
- 文章については変更不可です。

ご注意：黒枠内の赤色の文字は、お客差にご記載いただく部分を表しております。作成時に墨色にしてください。


## 傷テープ

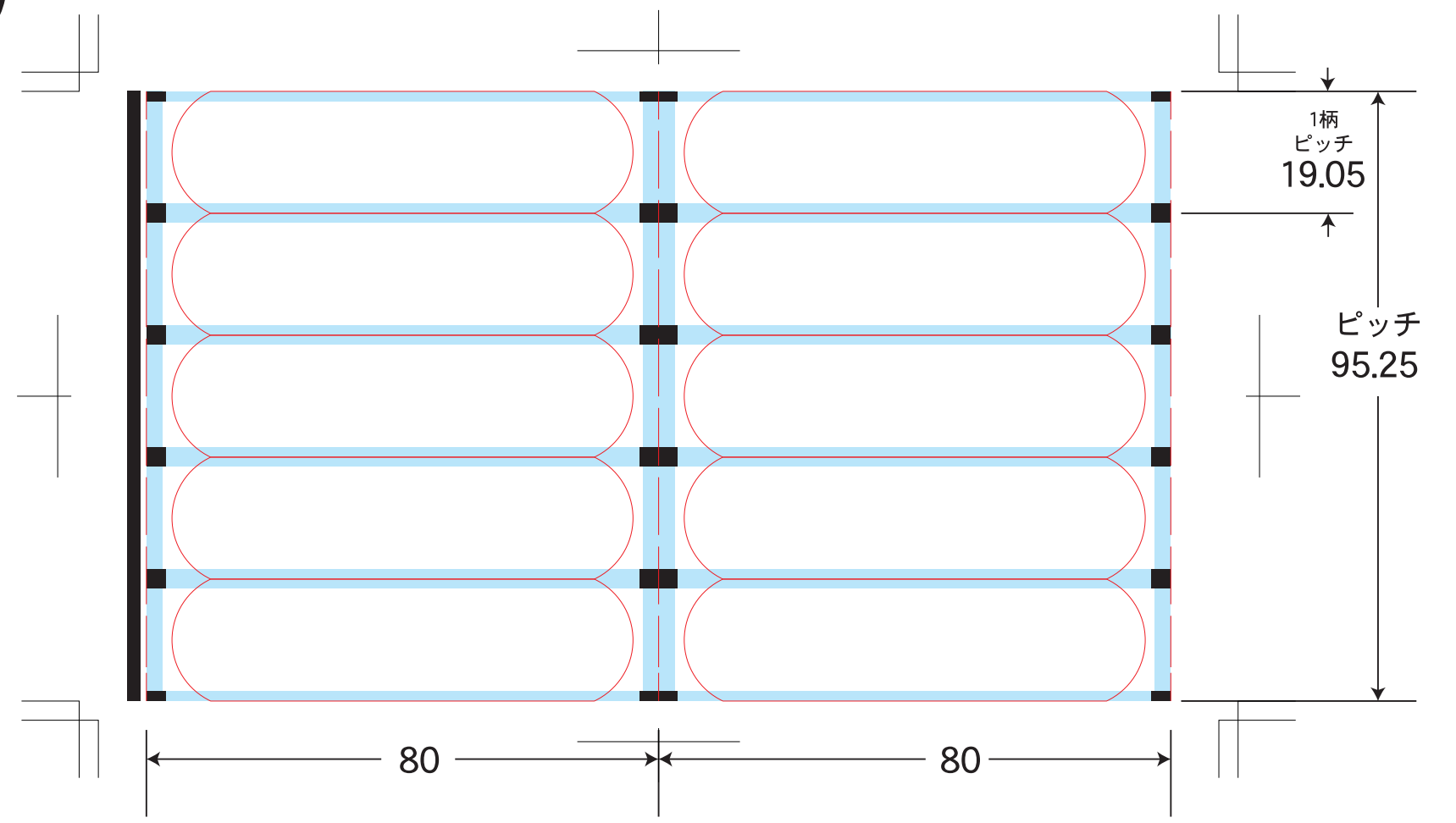

品名	<input checked="" type="checkbox"/> 新版・ <input type="checkbox"/> 改版	<input checked="" type="checkbox"/> グラビア印刷・ <input type="checkbox"/> デジタル印刷	色数 色 ( )	縦5柄×横2丁(10柄テンプレート)
Code No.1505-0000-000	<input checked="" type="checkbox"/> Illustrator CS5	製品規格：1柄ピッチ19.05×5・巾80×2丁		
備考：				

## Ai キズテープデザイン作成時のご注意

- 必ず当社指定のテンプレートをご使用ください。
- 他のレイヤー(A)はロック解除・削除せず残しておいて下さい。
- デザイン作成される場合は、(B)レイヤーをお使いください。
- デザインが複雑な場合は新規レイヤーを増やして頂いてOKです。但し、(A)はロック解除・削除せず残しておいて下さい。
- 必ずCMYKで作成して下さい。
- 上下左右の塗り足しをお願いします。(塗りたいレイヤーをお使いください)
- 切れてはいけない文字やロゴは3mm以内に配置して下さい。
- 文字は必ずアウトラインを作成して下さい。
- 画像のリンク切れにご注意下さい。
- 画像の解像度は300dpi以上で作成して下さい。
- 使用しているリンク画像はEPSまたはPSD形式で保存して下さい。
- 透明効果、ドロップシャドウ、グラデーション効果を使用される場合は、ドキュメントのラスターライズ効果設定を300dpi以上(高解像度)に設定して下さい。

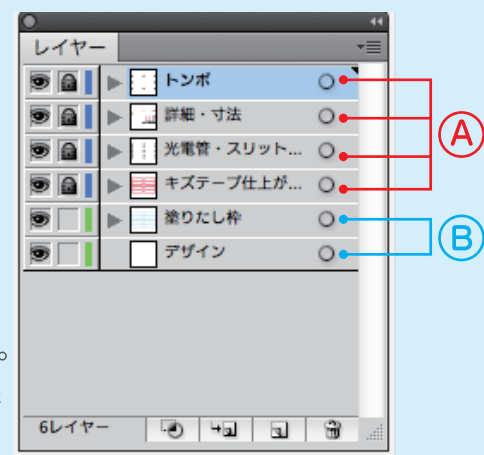

## Ai キズテープ入稿チェックポイント

ご入稿いただくデータが下記項目に1点でも該当した入稿データは、印刷工程へ進むことが出来ません。(再度入稿頂く必要がございます)ご入稿の前に必ずご確認ください。

- Check Point 01  
当社指定のテンプレートを  
使用されていますか？
- Check Point 02  
フォントのアウトラインは  
作成されていますか？
- Check Point 03  
配置画像(リンク画像やドキュメント)は  
必要なデータが揃っていますか？
- Check Point 04  
データのカラー設定はCMYKで  
作成されていますか？
- Check Point 05  
データは正常に  
保存されていますか？

当社入稿時IllustratorデータはCS5以下でお願いしております。CS5よりバージョン上位になりますと正常に印刷工程に進むことが出来ません。